


ORTOGNATHOS

Radiología 3D


Existen dos opciones diferentes para visualizar la radiografía realizada en 3D. Debe saber que desde un móvil no podrá ver la prueba, debe ser en un ordenador y que no sea de entorno MAC ya que no es compatible.

Lo primero de todo es descargar el visor (en nuestra web, en la parte de descargas/radiología/ Software iCatVision (visualizador iCat).

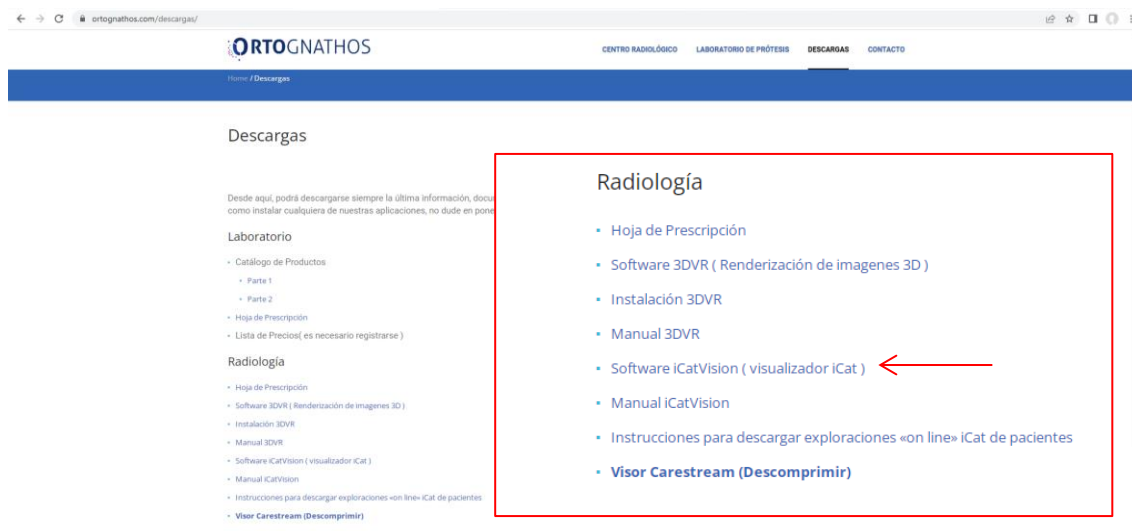

Cuando haya instalado el visor, descargue el archivo que le hemos enviado por e-mail.

Una vez descargado, debe descomprimirlo (botón derecho del ratón y extraer aquí o extraer todo, dependiendo del ordenador aparecerá de una forma pero básicamente hay que extraerlo).

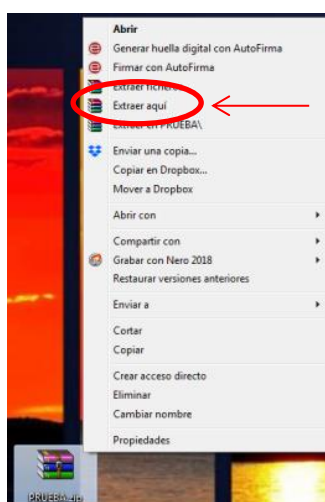


Cuando lo haya extraído obtendrá una carpeta amarilla y ahora sí explicamos las dos opciones que existen de visualizar la prueba.


1. Abre el visor IcatVision.

Pinche en: la segunda opción “Tools” / “Import Study” / Browse / seleccione la carpeta que descomprimió al principio / “Import”

Si escribe su apellido en la barra blanca que señalamos con la flecha, debe de aparecer su prueba en el cuadro de arriba.

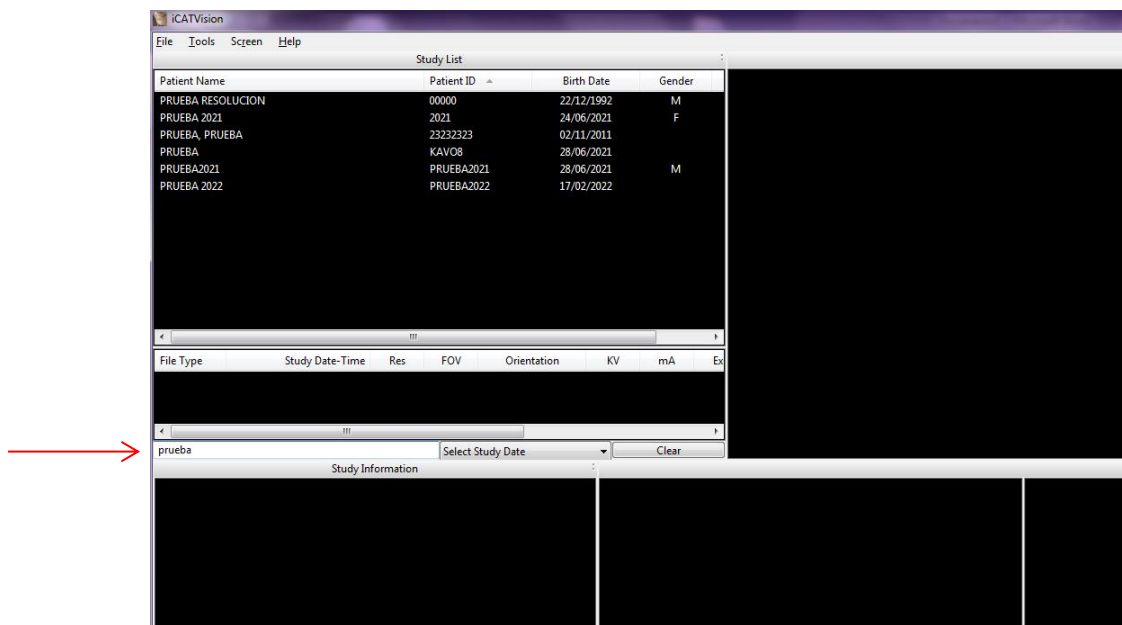

Como se indica en la siguiente imagen, aparecerán varias opciones “CT y RAW_CT”. Pinchamos en “CT”.

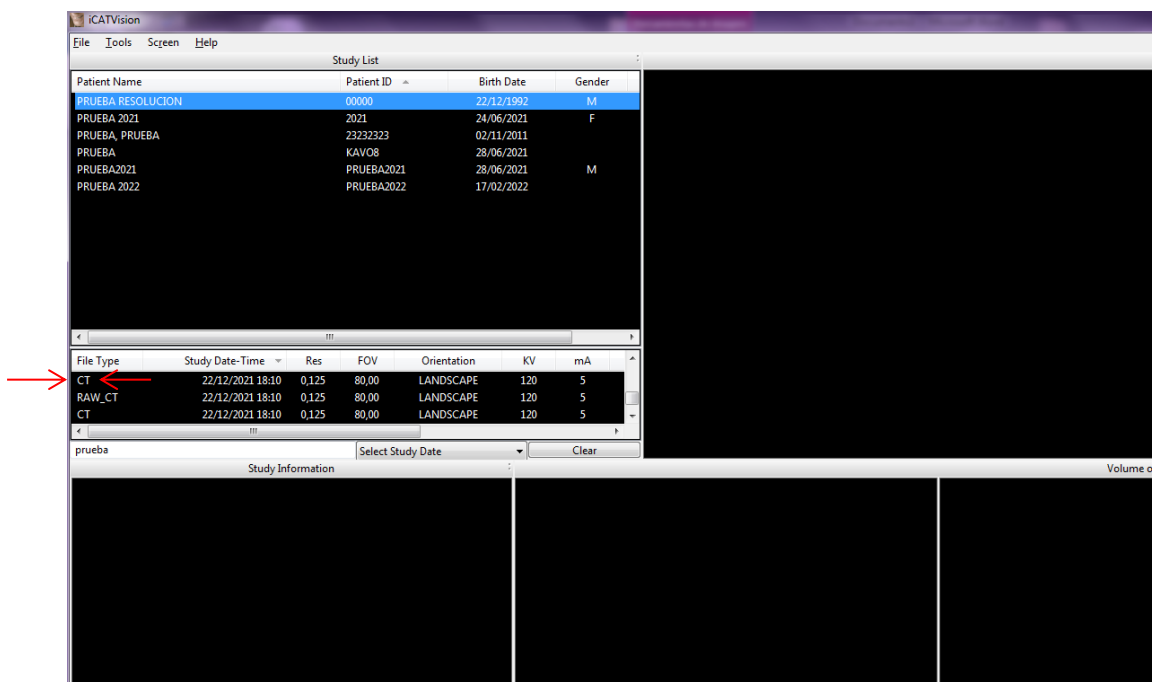

Se abrirá una nueva ventana que dependiendo de su prueba indicará opciones tales como: “Estudio”, “Arcada superior”, “Arcada inferior” o “Propuesta dentario”.
Pinche en ella y acepte.
Las imágenes cargarán automáticamente en las cuatro pantallas que aparecían en negras.

2. Otra opción es:

Copie la carpeta amarilla que descomprimió al principio.

Ve al inicio del pc y pinche en: “Equipo”/ “Disco local C” / “ImageRoot”

Pega la carpeta descomprimida en la carpeta ImageRoot

Abre el visualizador y debe de aparecerle su nombre. Para abrirlo es igual que indicamos en las imágenes anteriores.

Si la prueba no aparece, debe actualizar. Para ello pincha en la segunda opción del menú del visor “ Tools” / “Setup” / “Rescan” / “Aceptar” / “Ok”

